


**Jeder Tag ist ein Regacell® Tag.** Denn 36 Grad im Schatten sind nicht gleich 36 Grad Heilwärmetherapie. Letzteres fühlt sich auch im Sommer spürbar angenehmer an. Profitieren Sie deswegen selbst im Hochsommer und nicht nur in der kalten Winterzeit von der wohligen Wärme unserer Produkte.

Stellen Sie anfänglich als Höchsttemperatur (Betriebstemperatur) maximal 39 Grad ein und steigern Sie diese Temperatur nur, wenn Sie es bekömmlich finden!

Die Aufwärmphase beträgt ca.10 Minuten. In dieser Zeit sollte sich die Matte auf etwa 37 Grad erwärmt haben. Danach kann Ihre Therapiezeit beginnen, da die Matte nunmehr minütlich wärmer wird und ihre volle Wirkung entfaltet.

## Bedienungsanleitung für Steuergerät Regacell

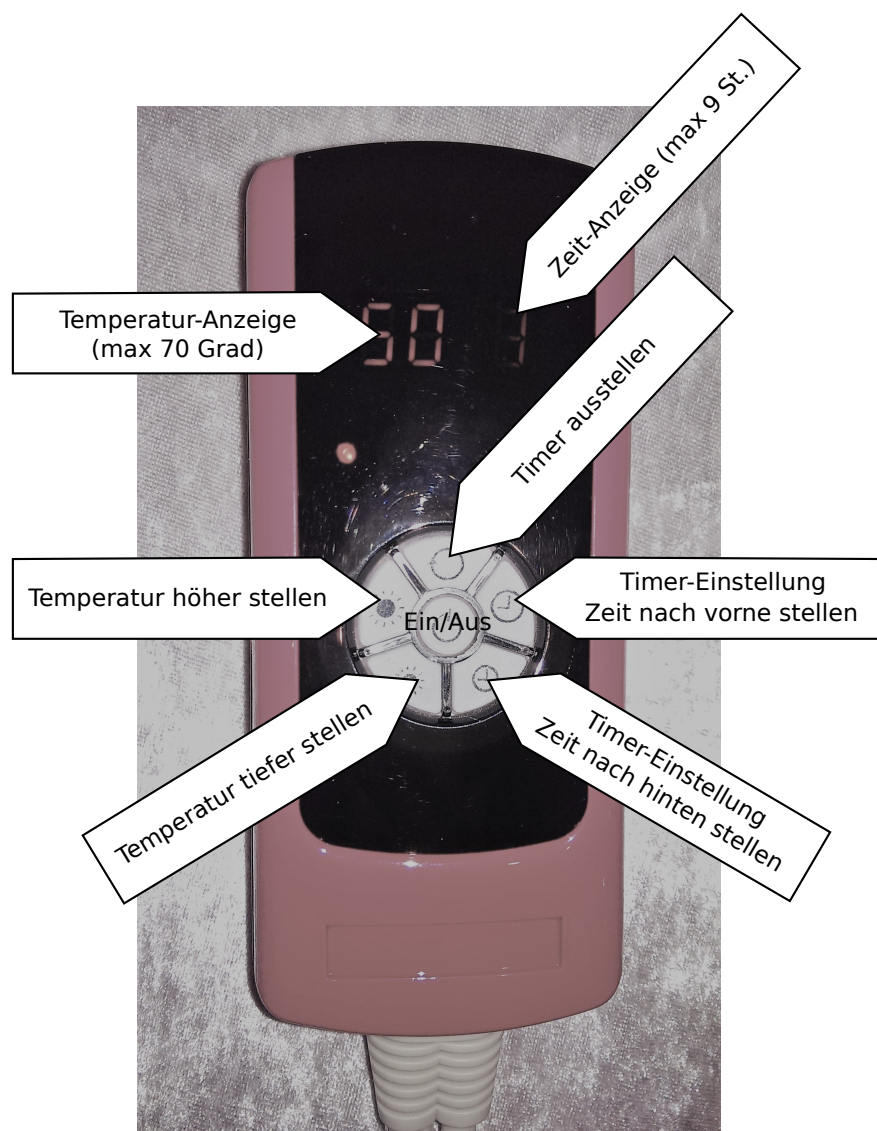

In der Regel dürften täglich dauerhaft 20 bis 30 Minuten Therapiezeit auf der Heilwärme-Matte ausreichen.

Leider kursieren auf einigen Seiten der Wettbewerber aberwitzige Empfehlungen zur Anwendungsdauer sogenannter Amethyst – Matten im Netz.

Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zur Anwendungsdauer im Fließtext unserer Seite / in unserer Gebrauchsanleitung und sprechen Sie unbedingt vorab mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie die normalen Therapiezeiten -- und damit die von uns empfohlenen Anwendungszeiten -- signifikant verlängern und / oder die Temperatur deutlich erhöhen möchten. Zu Ihrer Sicherheit!

Eine stundenlange Nutzung im Hochtemperaturbereich ist nicht zu empfehlen. Im einem Thermalbad würden Sie auch nicht länger als 30 Minuten baden. Da der Timer, siehe Seite 1, nur Stunden und keine Minuten anzeigt, empfiehlt sich vor Beginn der Therapiezeit einen Wecker zu stellen, damit Ihre 20 – 30 Minuten Therapiezeit nicht überschritten wird. Erholung ab der ersten Anwendung Viele Kunden berichten, dass sie auf der Matte in den ersten Tagen bereits nach wenigen Minuten eine gewisse Müdigkeit verspüren und einschlafen. Dieser Effekt legt sich mit der Zeit und Sie fühlen sich entspannt, wach und fit -- auch während der Anwendung.

Weitere Informationen finden Sie jederzeit unter **[www.regacell.de](http://www.regacell.de)** Oder fragen Sie uns einfach!